

## Table des matières

En quoi consiste sensilLight™ Mini	48
Description du dispositif sensilLight™ Mini	49
Qui est l'utilisateur de sensilLight™ Mini	52
Quand sensilLight™ Mini ne doit-il pas être utilisé	52
Possibles effets secondaires	55
Avantages	56
Consignes d'utilisation	56
Essai préliminaire	58
Protocole de soin recommandé	60
Soins du visage consécutifs au traitement	64
Nettoyage et dépannage	64
Service clientèle	65
Paramètres et spécifications du dispositif	66
Journal de soins	67
Étiquetage	69

l'optimisation de la réduction de pilosité à long terme:

- Le cycle de croissance du poil comprend trois phases : dites anagène, catagène ou télogène. La phase anagène est de croissance tandis que la catagène et la télogène sont des phases de repos. La réduction permanente de la pilosité ne peut avoir lieu que durant la phase anagène.
- Les grades de peau (relativement au phototype de Fitzpatrick) sont illustrés par le diagramme au dos de la couverture. Les peaux plus sombres contiennent plus de mélanine qui contrecarre l'absorption de l'énergie lumineuse par le poil ciblé. Plus grande est la quantité d'énergie absorbée par la peau, plus grand est le risque d'apparition d'effets indésirables et de lésion de l'épiderme.

PRENEZ SOIN DE LIRE ATTENTIVEMENT  
CE GUIDE D'UTILISATION AVANT  
DE COMMENCER LES SOINS  
AVEC SensilLight™ Mini. LE GUIDE  
D'UTILISATION, TOUT COMME UNE  
VIDEO DIDACTIQUE, RESTENT À  
VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE  
WWW.SENSICA.COM



## En quoi consiste sensilLight™ Mini

sensilLight™ Mini est un dispositif personnel destiné à ôter une pilosité indésirable. sensilLight™ Mini présente la technologie propriétaire RPL™ (Lumière réactive pulsée) de Sensica®.

### RPL™ (Lumière réactive pulsée) - Quel en est le fonctionnement

sensilLight™ Mini s'appuie sur le principe scientifique de la photothermolyse sélective. La technologie novatrice RPL™ (Lumière réactive pulsée) de sensilLight™ Mini utilise la technologie cliniquement éprouvée IPL combinée à des sondes de typicité de peau. La lumière pénètre l'épiderme jusqu'au derme où elle est absorbée par la mélanine dans la tige du poil. La chaleur est générée par la lumière absorbée, elle se dissipe ensuite dans le follicule où elle occasionne une altération locale induisant la réduction de croissance du poil.

### Réduction de pilosité à long terme – cycle de croissance du poil

Deux facteurs jouent un rôle majeur dans




## Description du dispositif sensilLight™ Mini

L'ensemble sensilLight™ Mini compte les principaux composants suivant :

- Le dispositif portable sensilLight™ Mini
- L'alimentation externe :

### Description du dispositif portable

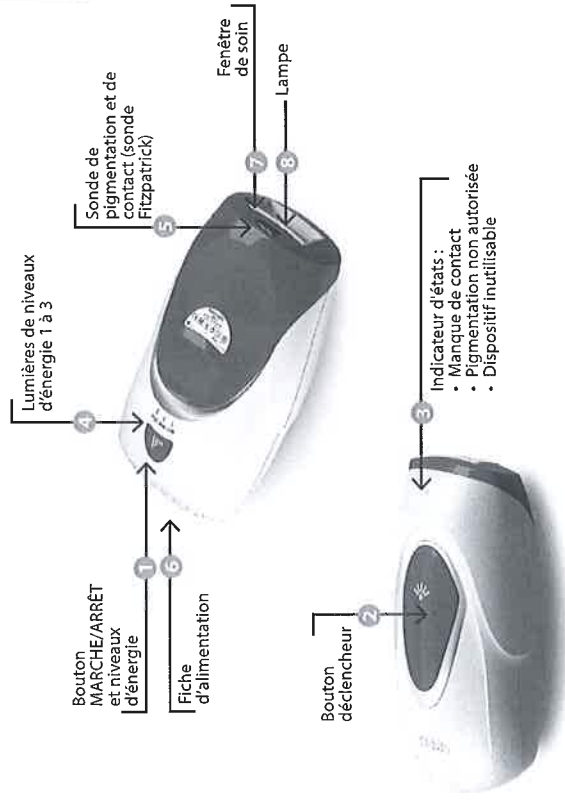

## Description de l'interface:

### L'interface d'utilisation comprend les caractéristiques suivantes:

1. Bouton Marche/Arrêt et niveaux
  - Un seul bouton est utilisé pour l'activation, la désactivation et le choix d'énergie du dispositif.
  - Une pression sur le bouton (une fois le dispositif branché à l'alimentation) va le mettre en marche sur le niveau d'énergie. Chaque pression change le niveau d'énergie, du plus faible au plus fort, pour un total de trois différents niveaux d'énergie.
  - Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé ou en maintenant la pression sur le bouton durant 3 secondes.
2. Le Bouton déclencheur (activation de la pulsation flash) repérée par un soleil sur le dessus du dispositif. Le Bouton déclencheur active la lampe flash si la fenêtre de soin et en parfait contact avec la peau et que la pigmentation de la peau est dans la marge autorisée. Une unique pression sur le bouton activera une seule impulsion,

le maintien de la pression activera des pulsations continues aussi longtemps que la pression durera.

Français

Français

Indicateur de	Mode	
Aucune lumière	ARRÊT	Le dispositif ne fonctionne pas (absence de branchement à l'alimentation).
Lumière verte clignotante	Veille	Le dispositif est en mode veille (avant de l'utiliser ou lorsqu'il n'est pas utilisé depuis plus de 3 minutes).
Lumières vertes de niveaux d'énergie 1 à 3	Niveaux d'énergie 1 à 3	Les trois niveaux d'énergie sont indiqués par trois LED vertes.
Lumière verte fixe	MARCHE	La pulsation est prête.
Lumière orange temporaire	Blocage de l'activation (pulsations)	Le dispositif ne délivre pas de pulsation du fait du manque de contact avec la peau.
Lumière rouge temporaire	Blocage de l'activation (pulsations)	Le dispositif ne délivre pas de pulsation du fait d'une pigmentation de peau non autorisée (les phototypes de grade élevé comme décrits au chapitre Cycle de croissance du poil - Réduction de pilosité).
Lumière orange clignotante	Proximité d'atteinte de la limite de longévité	Indique la proximité de la durée de vie de la lampe.
Lumière rouge fixe	Limite de longévité/bloqué	Le dispositif reste bloqué, soit parce que la lampe a atteint la limite de sa durée de vie, soit du fait d'une défaillance interne.



## Qui est l'utilisateur de sensilight™ Mini

- sensilight™ Mini est destiné aux femmes et aux hommes désireux d'enlever des poils indésirables.
- sensilight™ Mini est destiné à être utilisé sur les jambes, les bras, les aisselles, la bande maillot, le dos, les épaules, la poitrine et les parties autorisées du visage.
- sensilight™ Mini est destiné à être utilisé sur les grades de peau allant de I à V selon le phototype de Fitzpatrick ci-dessous (également reproduit en couleur au dos de la couverture de ce guide).

I	II	III	IV	V	VI
✓	✓	✓	✓	✓	✗

L'utilisation de sensilight™ Mini sur une peau naturellement sombre est interdite

- sensilight™ Mini fonctionne mieux sur les pilosités sombres ou sur des poils à forte concentration de mélanine. Les poils bruns et bruns clairs répondent, mais demandent habituellement plus de séances de soin. Les poils roux montrent quelques réponses. Les poils naturellement blancs, gris ou blonds montrent un taux de réponse plus limité. Certains utilisateurs ont toutefois remarqué une réduction de la pilosité après de multiples séances de soin.



Ne jamais utiliser sensilight™ mini- autour ou près de vos yeux

## Quand sensilight™ Mini ne doit-il pas être utilisé

### Qui ne peut pas utiliser sensilight™ - CONTRE-INDICATIONS

- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.
- N'utilisez pas sensilight™ Mini avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. L'innocuité de l'utilisation de sensilight™ Mini par, ou sur, des enfants n'étant pas établie, le risque de blessure sérieuse demeure.
- N'utilisez pas sensilight™ Mini si vous êtes enceinte, ou avec une infirme chance de l'être, ni si vous allaitez, tant que l'innocuité reste à établir et que demeure un risque dans la stimulation de la pigmentation.
- N'utilisez pas le dispositif si vous souffrez d'un cancer de la peau, ni sur des zones susceptibles de malignité, ni si vous avez été l'objet d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie durant les 3 derniers mois, l'innocuité reste à établir et, du système immunitaire possiblement défaillant, de sérieuses blessures peuvent découler.
- N'utilisez pas sensilight™ Mini si vous souffrez d'épilepsie, il pourrait déclencher une crise.
- Ne l'utilisez pas si votre peau est abîmée ou coupée ou si vos antécédents médicaux font mention de poussées d'herpès ou de psoriasis sur la zone de soin puisque cela peut entraîner de sérieux effets secondaires.
- Ne l'utilisez pas si vous souffrez de formations

chéloïdiennes (excroissance tissulaire apparue suite à la cicatrisation d'une plaie), l'innocuité n'étant pas vérifiée et de sévères complications pourraient survenir au niveau de la peau.

- Ne l'utilisez pas si vous avez pris des antibiotiques à base de tétracycline et/ou quelque autre médicament contenant un des principes actifs suivants durant les quinze derniers jours : acide rétinoïque, rétin-A, vitamine A telle qu'avec l'isotrétinoïne puisque ils sont considérés être des médicaments photosensibles et que de sévères lésions cutanées peuvent découler.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini si vous êtes photo-sensible ou souffrez d'autres troubles liés à la sensibilité à la lumière, cela pourrait se conclure par de sévères blessures.
- Ne l'utilisez pas si votre souffrez de troubles ou de décompensation du métabolisme tel un diabète puisque cela pourrait se conclure par un retard de guérison et une infection en cas d'effet secondaire.
- Ne l'utilisez pas sur une peau ayant été fait l'objet d'une exfoliation durant les deux derniers mois, cela pourrait se conclure par une stimulation de la pigmentation.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur la zone du visage au-dessus des pommettes ou autour des yeux, sourcils et cils, cela pourrait se conclure par de sévères lésions oculaires

**Remarque:**

Si vous avez suivi toute autre procédure esthétique ou doutez de possibles effets secondaires, consultez votre médecin avant d'utiliser sensLight™ Mini.

**Ce que vous devez impérativement vous abstenir de faire pour éviter de sévères blessures - MISES EN GARDE :**

- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux susceptibles de provoquer de sérieux dommages corporels.
- Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez sensLight™ Mini à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Ne laissez pas le dispositif sensLight™ Mini branché sans surveillance puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Ne regardez en aucun cas la lumière directement issue de la fenêtre de soin sensLight™ Mini cela pourrait se conclure par des lésions oculaires.
- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser sensLight™ Mini,

Français

Français

puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

- N'utilisez pas sensLight™ Mini si vous êtes porteur d'implants actifs telle qu'un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou tout dispositif similaire, puisqu'il pourrait produire des interférences.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur une peau bronzée ou récemment exposée au soleil vous seriez alors exposé à un risque de brûlure sérieuse ou de lésion cutanée. Évitez l'exposition au soleil durant le mois précédant chaque soin.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur une peau naturellement sombre (voir l'illustration au dos de la couverture et les hauts grades du phototype de Fitzpatrick au chapitre Qui est l'utilisateur de sensLight™).
- N'utilisez pas sensLight™ Mini si votre peau laisse apparaître des taches brun foncé ou noir, telles des taches de rousseur, de naissance, un nævus, une phlyctène sur la zone de soin, ni sur les aréoles.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur des muqueuses comme les narines, lèvres buccales, paupières, yeux, organes génitaux ou l'anus puisque vous seriez alors exposé à des risques de sévères lésions.
- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur une zone de soin présentant un piercing ou un corps métallique tel que des boucles d'oreilles ou

un bijou puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure.

- N'utilisez pas sensLight™ Mini sur une zone de soin présentant un tatouage ou un maquillage permanent.
- Ce que vous devez impérativement respecter pour éviter d'autres blessures - AVERTISSEMENTS:**
- N'utilisez pas sensLight™ Mini autrement que de la façon décrite dans le Guide d'utilisation.
  - L'épilation au moyen du laser ou d'une source de lumière intense puisée peut stimuler la croissance des poils chez certains individus. Sur la base des données disponibles ce jour, le groupe à plus haut risque, relativement à cette réponse, se constitue des femmes de descendance méditerranéennes, moyen-orientales et sud-asiatiques sur le visage et le cou desquelles le soin est appliqué.
  - Cette application n'est pas destinée à une utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensibles ou mentales réduites.
  - N'utilisez pas le dispositif si:
    - Celui-ci ne fonctionne pas correctement, semble endommagé ou cassé (UV et IR émis depuis ce dispositif).

## Possibles effets secondaires

Lorsque vous utilisez sensilight™ Mini en observant les consignes Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Toutefois, de toute procédure esthétique, incluant celles faisant appel à des dispositifs à usage intime, peut découler un certain degré de ressentir d'effets secondaires. Il est de fait important que vous compreniez et acceptiez les risques et les complications qui pourraient survenir suite à l'utilisation d'un système d'épilation à lumière pulsée:

- Son cordon ou ses prises sont endommagés.
- Vous voyez ou sentez de la fumée.
- Le boîtier externe est endommagé ou branlant.
- La lampe ou la fenêtre de soin sont endommagées ou perdues.
- La sonde de pigmentation optique est fendue ou cassée.
- Il devient humide.
- Évitez les expositions au soleil de plus d'un quart d'heure durant les quinze jours suivant le soin. Si durant ces quinze jours la peau ayant fait l'objet du soin devait être exposée au soleil, prenez soin d'y appliquer en préalable une crème solaire d'indice de protection 30 au moins.
- N'appliquez pas le soin plus d'une fois sur la même zone lors d'une même séance puisque cela pourrait se conclure par des irritations cutanées.

### Remarque:

sensilight™ Mini est conçu pour être utilisé par un unique utilisateur.

Utilisez sensilight™ mini-seulement avec son alimentation électrique d'origine. Pour votre sécurité, ne jamais utiliser des adaptateurs DC qui ne sont pas approuvés par le fabricant.



## Avantages

sensilight™ Mini inclut une sonde de pigmentation cutanée automatique et intégrée qui est conçue pour vous apporter une complète sécurité et une parfaite tranquillité. La sonde évalue en permanence la pigmentation de la peau et ne permet le fonctionnement de sensilight™ Mini que sur les zones appropriées. Cette fonctionnalité de sécurisation intelligente interrompt automatiquement le soin si votre peau est trop sombre ou trop bronzée.

En guise de précaution supplémentaire, l'extrémité active a été conçue pour n'émettre de pulsations lumineuses que lorsque le contact avec votre peau est complet.

La réponse à l'épilation sensilight™ Mini varie selon les individus, en fonction de facteurs biologiques et de l'attention portée au respect des consignes de soin.

Sur la base du régime de soins exposé dans ce guide d'utilisation, vous pouvez vous attendre à voir des résultats sous 3 à 4 semaines.

Les poils continueront de pousser jusqu'à deux semaines après la séance de réduction. Toutefois, par la suite, puisque la croissance

des poils se déroule en trois phases, ils tomberont naturellement de façon graduelle selon la phase de croissance qui était la leur au moment où le soin a été appliqué. Certains poils peuvent ne pas être affectés par sensilight™ Mini, en effet, seuls ceux dans une phase de croissance le sont, et donc ceux dans les deux autres phases ne le seront pas.

La réussite d'une épilation permanente dépend du respect du régime de soin.

Pour réduire de façon permanente la repousse des poils définie comme à long terme, une réduction stable dans le nombre de repousses lorsque mesurée à 6, 9 et 12 mois, vous devriez suivre le régime de traitement.

## Consignes d'utilisation

sensilight™ Mini est destiné à être utilisé sur les jambes, les bras, les aisselles, la bande maillot, le dos, les épaules, la poitrine et les parties autorisées du visage.

## Mise en ordre du dispositif

1. Sortez tous les composants de la boîte (dispositif portable et alimentation).
2. Avant de commencer le soin, vérifiez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact.
3. Branchez l'alimentation dans la prise électrique murale et le cordon dans la fiche d'alimentation du dispositif (Repérez sur l'image).

sensilight™ Mini est à présent prêt à être utilisé !



### Comment vous apprêter

1. Avant toute utilisation, veillez à ce que votre peau soit rasée, sèche et propre (exempte de tout résidu de poudre, crème, maquillage, anti-transpirant ou déodorant).
2. Entre les soins, vous pouvez raser les poils mais ne les épiliez pas, ni n'utilisez de cire.
3. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser sensilLight™ Mini, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.

**Souvenez-vous :** Que sensilLight™ Mini dispose d'une sonde de pigmentation intégrée, ne permettant l'application que sur les peaux de grades appropriés. Cette fonctionnalité de sécurisation unique ne vous laisse pas appliquer un soin sur une zone où la peau serait trop sombre ou trop bronzée, même votre peau est plus claire dans l'ensemble.

- L'entretien et la longévité de sensilLight™ Mini sont absolument liés à son nettoyage (chapitre Nettoyage).
- Réalisez un essai préliminaire sur une petite portion de la peau (de préférence,

### Essai préliminaire

L'essai préliminaire est destiné à déterminer la réactivité de votre peau au soin sensilLight™ Mini et à vous aider à établir les meilleurs niveaux d'énergie pour chaque zone de soin. Réalisez un essai préliminaire sur chacune des zones sur lesquelles vous avez l'intention de d'appliquer un soin, 48 heures avant de réaliser le soin entier.

#### Remarque:

**N'appliquez nul soin sur une zone complète à un niveau d'énergie que vous n'auriez pas préalablement essayé!**  
**N'apportez pas de traitement à la zone testée durant au moins 48 heures après que l'essai préliminaire ait été conduit**

1. Choisissez le niveau le plus faible et délivrez une pulsation sur la parcelle de peau sur laquelle l'essai est conduit.
2. Si le niveau vous semble confortable, passez-le au niveau 2 et appliquez la pulsation sur le point suivant.
3. Le niveau de confort doit seul vous guider quant à l'application du niveau d'énergie maximum
4. Cessez l'essai dès que vous commencez de ne plus trouver la séance confortable, puisque l'augmentation du niveau d'énergie s'accompagne de celle des risques d'effets indésirables.

5. Si vous constatez un effet indésirable tel qu'une sévère rougeur ou la formation de cloques, cessez immédiatement l'essai.

6. Attendez 48 heures et examinez la zone de soin.

- Si la peau sur la zone d'essai semble normale (sans réponse ou seulement de légères rougeurs), vous pouvez procéder au soin complet aux plus hauts niveaux d'énergie essayés.
- Si vous constatez une rougeur extrême, un gonflement ou une cloque, même sur le niveau d'énergie le plus faible, n'allez pas au bout du soin sur cette zone et consultez un médecin.

### Comment utiliser le dispositif sensilLight™ Mini


#### Remarque:


Un essai préliminaire doit être réalisé en préalable du soin complet. Consultez le paragraphe Essai Préliminaire ci-dessus.


1. Pour mettre sous tension sensilLight™ Mini, pressez le bouton MARCHÉ/ARRÊT (Repère 1 sur l'image). L'indicateur de niveau d'énergie 1 s'allume en vert.
2. Le dispositif se cale de lui-même sur le niveau d'énergie le plus bas - Niveau 1. Pour accéder aux autres niveaux, pressez le bouton de choix de niveau d'énergie (Repère 2 sur l'image).

Français

Français

3. Vous devez diminuer ou augmenter le niveau d'énergie sur la base de votre confort (pour atteindre celui déterminé lors de l'essai préliminaire). Les lumières de niveau d'énergie (Repère  sur l'image) s'allument en vert sur l'échelle de niveaux affichant ainsi celui choisi.

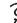4. Positionnez la fenêtre de soin du sensilight™ Mini (Repère  sur l'image) de manière à qu'elle soit en parfait contact avec la peau de la zone du corps par laquelle vous souhaitez débiter. Si sensilight™ Mini n'est pas correctement appliqué sur la peau ou que la pigmentation de celle-ci est trop sombre/bronzée, l'indicateur clignote en rouge. Dans ce cas, sensilight™ Mini ne déclenchera pas de pulsation sur cette portion de peau.

5. Pressez sur le bouton déclencheur (Repère  sur l'image) et maintenez-le appuyé pour une répétition de pulsations.

6. Pressez sur le bouton déclencheur une seule fois pour une unique pulsation.

7. Lorsque vous pressez le bouton déclencheur, vous voyez un flash brillant, entendez un bruit sec et pouvez ressentir une légère piqure et/ou sensation de chaleur.

8. Maintenez le bouton pressé et commencez de déplacer le dispositif

en appliquant chaque pulsation à un nouveau point sans éloigner la fenêtre de soin de la peau. Le dispositif se recharge immédiatement et se tient prêt pour la prochaine pulsation. Répétez le processus jusqu'à ce que la totalité de la zone ait été couverte.

9. Une fois le soin terminé, mettez le dispositif hors tension en appuyant sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT durant 3 secondes ; un indicateur orange s'allume lorsque le dispositif passe en mode veille. Débranchez le dispositif après chaque séance de soins.

#### Remarques importantes:

- N'essayez pas de faire se chevaucher les pulsations sur le même point. Les pulsations répétées sur un même point peuvent se conclure par des brûlures.
- Pendant le traitement, ne maintenez pas l'embout de l'applicateur au même endroit sans bouger ; cela peut occasionner des irritations cutanées. N'appliquez pas le soin plus d'une fois sur la même zone lors d'une même séance puisque cela pourrait se conclure par des irritations cutanées.
- sensilight™ Mini **ne déclenchera** pas de pulsation si :
  - La surface de traitement n'est pas en contact direct avec votre peau.
  - La teinte de votre peau est trop foncée.

## Protocole de soin recommandé

### Intervalle de soin habituel pour sensilight™ Mini :

- Lors de l'application du soin avec sensilight™ Mini veillez à ne pas faire se chevaucher les pulsations sur le même point
- Pilosité corporelle : Les quatre premiers soins seront appliqués à approximativement deux semaines d'écart l'un de l'autre.
- Les quatre suivants seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.
- Pilosité faciale : Les cinq premiers soins seront appliqués à approximativement deux semaines d'écart deux semaines d'écart l'un de l'autre.

- Les trois suivants seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.
- Au-delà du huitième, le soin épilatoire sera appliqué selon les besoins jusqu'à ce que le résultat escompté soit atteint.

#### Niveaux d'énergie :

Les niveaux d'énergie recommandés dépendent tant de la couleur de votre pilosité que de celle de la peau sur la zone de soin. Par souci de commodité, nous avons fait figurer ci-dessous un tableau dans lequel un niveau d'énergie est recommandé pour chacune des options.

**Important : Le soin du visage ne peut être appliqué qu'aux seuls niveaux d'énergie 1 et 2.**

Poil	Type de peau	I	II	III	IV	V	VI
Noir	///	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Brun foncé	///	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Brun	///	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Blond foncé	///	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Blond clair	ii	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Roux	ii	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 1-2	Énergie 1-2	X
Gris/Blanc		Énergie 2-3	Énergie 2-3	Énergie 2-3	X	X	X



### Prévoyez votre soin sensilLight™ Mini

Le niveau d'énergie doit en premier lieu être choisi sur la base de votre propre confort.

Les niveaux d'énergie s'échelonnent du niveau 1 au 3 avec une fluence lumineuse allant de 3 à 5 J/cm<sup>2</sup>.

Chaque pulsation de soin doit être appliquée sur un point différent de la peau, sans répétition, ni chevauchement. L'étendue de la zone de soin (aisselle, bande maillot, bras, dos, épaules, poitrine, jambes et parties autorisées du visage) sera définie par l'utilisateur.

#### Remarques:

1. La réponse à la réduction de pilosité sensilLight™ Mini diffère d'une personne à l'autre, en fonction de facteurs biologiques.
2. sensilLight™ Mini fonctionne mieux sur les pilosités sombres ou sur des poils à forte concentration de mélanine. Les poils bruns et bruns clairs répondent, mais demandent habituellement plus de séances de soin. Les poils roux montrent quelques réponses. Les poils blancs, gris ou blonds montrent un taux de réponse plus limité.
3. Il peut se passer entre 3 et 4 semaines avant que des résultats complets du soin

### Soin du visage

La peau du visage est une zone sensible que nécessite soins particuliers et précautions. Faites en sorte de suivre scrupuleusement les consignes et les mises en gardes afin d'éviter les effets indésirables.

Il est recommandé de débiter par le soin sur le corps et ainsi se familiariser avec le déplacement du dispositif, pour ensuite passer au soin du visage.

sensilLight™ Mini peut être utilisé pour apporter un soin sur toutes les zones du visage en dessous de la ligne des pommettes, soit la lèvre supérieure, les joues, la mâchoire, le menton et le cou.




#### AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le niveau d'énergie supérieur à 2, puisque cela pourrait se conclure par une brûlure. Baissez le niveau d'intensité au niveau 1 si vous ressentez une gêne. Si cette gêne perdure, Cessez l'utilisation.

- N'utilisez pas sensilLight™

Mini sur le visage au-dessus des pommettes ou autour des yeux, sourcils et cils, cela pourrait se conclure par de sérieuses lésions oculaires.

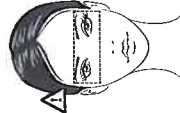

1. Repérez la zone de soin au moyen d'un trait de crayon à pastille blanc. Utilisez cette marque comme guide lors de la délivrance des pulsations. De cette manière vous évitez les zones de chevauchement de soins ou l'apport de soins sur une zone proscrite.
2. Utilisez un miroir pour vous aider dans le positionnement de la fenêtre de soin sur la peau.
3. Suivez les consignes relatives aux précautions supplémentaires concernant les zones spécifiques suivantes.

#### Remarque:

La pilosité du visage peut être hormonale et, de la sorte, réclamer plus de séances pour parvenir à une réduction capillaire permanente.



sensilLight™ Mini ne soient observés. Les poils continueront de pousser jusqu'à deux semaines après la séance de réduction. Toutefois, par la suite, puisque la croissance des poils se déroule en trois phases, ils tomberont naturellement de façon graduelle selon la phase de croissance qui était la leur au moment où le soin a été appliqué. Certains poils peuvent ne pas être affectés par sensilLight™, en effet seuls ceux dans une phase de croissance le sont, et donc ceux dans les deux autres phases ne le seront pas. Pour supprimer ce type de pilosité, plusieurs séances de soins devront être conduites pour parvenir aux résultats escomptés.

4. Le nombre de séances nécessaires pour parvenir à des résultats à long terme est différent pour chaque zone de soin et varie selon les particularités de chacun, puisque il dépend du type de peau, de poil et des changements hormonaux.
- Des séances d'entretien seront de temps en temps nécessaires si la croissance demeure visible.
  - Utilisez le journal de soin figurant à la fin de ce guide, il vous aidera à tenir un relevé spécifique et détaillé des soins en notant les zones, dates et durées.



### Soins sur la lèvre supérieure, la joue, la mâchoire, le cou et le menton

Positionnez la fenêtre de soin (Repère ② sur l'image) sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration. Déclenchez une pulsation sur chaque point.



#### Lèvre supérieure:

Évitez les narines et la pulpe des lèvres puisque ces zones sont plus sensibles. Vous pouvez entrer votre lèvre à l'intérieur ou les presser l'un contre l'autre afin d'aboutir à une meilleure répartition des soins sur la zone.

#### Joue et mâchoire:

Positionnez la fenêtre de soin sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration. Déclenchez une pulsation sur chaque point, déplacer le dispositif d'un côté à l'autre de la mâchoire/joue.



#### Cou et menton:

Positionnez la fenêtre de soin sur la zone de la manière indiquée sur l'illustration. Déclenchez une pulsation sur

chaque point, déplacer le dispositif d'un côté à l'autre du menton/cou.

#### Remarque:

La peau du tiers inférieur du cou est plus sensible. Évitez le chevauchement des zones de soin. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une gêne.

#### Pour monsieur

Faites attention lors de la délivrance du soin sur la zone barbe, la densité des poils implique une grande quantité de mélanine qui absorbe la chaleur. Il est recommandé de réaliser les premiers traitements aux seuls niveaux d'énergie 1 ou 2.

Il n'est pas recommandé de pratiquer une réduction complète de la barbe puisque cela pourrait modifier les caractéristiques faciales et féminiser votre apparence.

#### Remarque:

Des caractéristiques d'un vieillissement prématuré peuvent émerger de la perte complète de pilosité faciale

### À quoi pouvez-vous vous attendre en utilisant sensilight™ Mini

Lors du soin épilatoire il est normal de constater :

- Un flash lumineux lors de chaque pression sur le bouton d'activation. La lumière ne blessera pas vos yeux lorsque le dispositif est en parfait contact avec la peau de la zone de soin recommandée.

- Un bruit sec lors de chaque pulsation – se produisant dans la mesure où la pulsation est activée.

- Une sensation de chaleur – irradiant de l'énergie lumineuse après chaque pulsation.
- Une légère sensation de piqure – peut être ressentie, similaire à celle ressentie avec un collier élastique.

- Quelques colorations rouge pâle ou rose de la peau – durant ou juste après le soin.

### Soins du visage consécutifs au traitement

- La rougeur disparaît généralement dans les 24h. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2-3 jours.

- Si des brûlures ou des cloques apparaissent, si vous ressentez une quelconque gêne, arrêtez immédiatement.

- Appliquez une lotion apaisante comme à base d'aloé vera. Nous vous recommandons l'utilisation de Sérüm après soin Sensica pour augmenter l'efficacité et la persistance des résultats.

- Évitez les crèmes ou produits épilatoires ou éclaircissants durant au moins 24 heures, cela pourrait se traduire par des irritations sur la zone de soin.

- Évitez les expositions au soleil durant les quinze jours suivant le soin. Si les parties du corps ayant reçu un soin devaient être exposées au soleil durant cette période, elles devraient être préalablement enduites d'une crème solaire d'un indice de protection au moins égal à 30.

- N'utilisez ni cire, ni pinces à épiler sur la zone de soin.

**Souvenez-vous:** Cela peut prendre plus de 2 semaines pour que le poil croisse et soit complètement dehors, le follicule pileux est toujours actif.

### Nettoyage et dépannage

- Prenez soin de mettre toujours hors-tension et débrancher le dispositif avant le nettoyage.

- Il est recommandé de nettoyer la fenêtre de soin après chaque séance en utilisant un chiffon sec et propre pour essuyer délicatement le dispositif.

- Faites en sorte que sensilight™ Mini soit toujours sec. Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez sensilight™ Mini à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.

- Si vous n'envisagez pas d'utiliser sensilight™ Mini d'un long moment, nous vous recommandons de le garder propre et rangé.

Français

Français

- Si vous envisagez de voyager et de prendre sensilight™ Mini avec vous, vous devez le ranger dans son emballage d'origine et suivre les consignes d'entretien.

### Dépannage

- Si vous rencontrez n'importe quel problème avec sensilight™ Mini réévaluez-vous aux informations données ci-dessous pour essayer de le résoudre.
- Si sensilight™ Mini ne peut être mis sous tension:
  - Vérifiez à ce que le cordon soit correctement enfilé d'une part dans le dispositif sensilight™ Mini et d'autre part dans la prise murale.
  - Vérifiez à ce que la prise murale soit alimentée.
- Si sensilight™ Mini ne déclenche pas de pulsation:
  - Vérifier le parfait contact avec la peau. Le bouton déclencheur ne délivre l'impulsion que si le dispositif est en parfait contact avec la peau.
  - Vérifiez que la zone sur laquelle vous essayez d'appliquer le soin n'est ni trop petite, ni trop courbe, ni trop osseuse. La totalité de la fenêtre de soin doit être au contact de la zone de soin (essayez de tirer la peau).
  - La couleur de peau est identifiée comme trop sombre par sensilight™ Mini, l'activation du flash est bloquée.

### Paramètres et spécifications du dispositif

- Spectre lumineux émis: 475 [nm] to 1,200 [nm] max.
- Flux d'énergie émis: 5 [J/cm<sup>2</sup>]
- Différents niveaux d'énergie: 3 niveaux
- Zone de soin (fenêtre): 3 [cm<sup>2</sup>]
- Vitesse: pulsation toutes les 3 secondes ; 1 [cm<sup>2</sup>] per seconde
- Alimentation externe: 12 [V], 1,8 [A] 100-240 [VCA], 50-60 [Hz]
- Poids et dimensions du dispositif: 220 [gr], 135x45x75 [mm] 7.8 [Oz], 5.3x1.77x2.96 [in]

Technologie : IPL à usage domestique

### Consigne de rangement

#### Rangement et conditions de transport

Température	-10°C à 70°C (14°F à 158°F)
Humidité	0 à 90% RH à 55°C (131°F)
Pression	sans condensation

#### Conditions de fonctionnement

Température	10°C à 40°C (50°F à 104°F)
Humidité	30% à 70% RH
Altitude maximale de fonctionnement	3 000 m

Français

Français

- Dans le cas de problème de sécurité ou lorsque la lampe a atteint sa durée de vie maximale, une lumière fixe rouge s'allume. Le dispositif se met de lui-même hors-tension.

### Erreur générale :






- En présence de débris ou de saouillures sur la fenêtre de soin, vous serez conduit à la nettoyer selon la manière décrite au chapitre Nettoyage. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.
- Dans le cas d'un retard dans la disponibilité de l'impulsion, l'application du soin dans un environnement plus frais sera à prévoir. Le dispositif peut être plus lent dans la délivrance des pulsations dans un environnement chaud
- En cas d'erreur générale, réinitialisez le dispositif – débranchez l'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes puis rebranchez.
- Si les problèmes de votre sensilight™ Mini persistent, contactez notre service clientèle.

### Service clientèle

Pour obtenir des informations complémentaires sur votre sensilight™ Mini, parce qu'il est cassé ou ne fonctionne plus, que vous réclamez une assistance supplémentaire, s'il vous plaît contacter votre service clientèle local Sensica ou visitez notre site web:

[www.sensica.com](http://www.sensica.com)






## Journal de soins

Date du soin	Zone de soin	Commentaires
		
		
		
		
		

67

Français

Français

Date du soin	Zone de soin	Commentaires
		
		
		
		
		

68

## Étiquetage

Modèle : IPL030EU



Double isolation



Consultez les consignes d'utilisation



Tenir à l'écart des yeux



Déchets électrique et électronique

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Papier et emballage carton à trier



Veillez lire tous les avertissements et mises en garde avant toute utilisation



N'utilisez pas le dispositif sensilLight™ Mini sur des peaux sensibles bronzées ou après une exposition au soleil



Ne laissez pas le dispositif devenir humide. Tenir à l'écart des baignoires, douches, lavabos et autre récipient contenant de l'eau. Faites en sorte qu'il demeure sec



Utilisez sensilLight™ mini-seulement avec son alimentation électrique d'origine. Pour votre sécurité, ne jamais utiliser des adaptateurs DC qui ne sont pas approuvés par le fabricant.



Français